

사용법

사용 방법

- 원하는 모드 선택을 위해 전원 버튼을 짧게 누르십시오.
- 작동을 위해 전원 버튼을 0.5초 이상 누르십시오. 작동은 7번항 이행 후 진행하십시오.
- 작동 중 모드변경을 원할 경우, 전원 버튼을 짧게 눌러 변경하십시오.
- 노즐을 입에 넣은 후 입술로 노즐 주위를 물어 주변에 물이 튀지 않도록 사용하십시오.
※ 세면대 앞에서 사용하여 사용된 물이 세면대로 떨어지도록 하여주십시오.
- 노즐 끝부분을 수평으로 놓습니다.
- 위, 아래의 한쪽 끝 치아에서 시작하여 치열을 따라 치아 사이를 이동하여 세정합니다.

사용법

- 노즐 이동하며 안쪽, 바깥쪽 치아를 모두 세정합니다.
- 작동 중 전원을 끄고 싶다면 전원 버튼을 0.5초 이상 누르십시오. 또는 사용 중 2분 경과하거나 물이 모두 소진되면 자동으로 전원이 꺼집니다.
※ 호스가 물통 벽면에 완전 밀착되어 있을 경우 물이 소진되어도 전원이 꺼지지 않을 수 있습니다.
- 탈착 방법
1. 노즐을 수직 방향으로 잡아당겨 분리하십시오. 잘못된 방향으로 잡아당길 시 파손의 원인이 됩니다.
2. 급수통을 분리할 경우 수직 방향으로 잡아당겨 분리하십시오.
※ 별도의 잠금장치가 없으므로 바로 분리하시면 됩니다.

주의사항

- 화염이나 열에 노출시키지 마십시오.
- 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 육안으로 식별이 가능할 정도로 손상된 외관을 가진 전지는 위험할 수 있으므로 제조사 혹은 판매자에게 즉시 문의해 주십시오.
- 성능 개선을 위해 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
- 사용 시**
 - 사용방법 및 주의사항을 충분히 숙지하고 사용하십시오.
 - 최근 잇몸 수술을 받았거나 통증이 있는 분들은 전문의와 상담 후 사용하십시오.
 - 처음 사용 시 잇몸에 무리가 가서 출혈이 발생할 수 있습니다. 출혈이 있을 시 Soft 모드 사용하시길 권장하며, 사용 후 2주 이상 출혈이 지속될 경우 사용을 멈추고 전문의와 상담하십시오.
 - 사용 후 잇몸이 심하게 붓는 경우에는 사용을 멈추고 전문의와 상담하십시오.
 - 눈이나 귀, 코 등 다른 신체기관에 사용하지 마십시오.
 - 아이가 가지고 놀지 못하게 하십시오.
 - 5분 이상 연속해서 작동할 시 모터과열로 인한 고장이 될 수 있습니다.
 - 거꾸로 사용할 경우 급수통의 공기구멍으로 인해 물이 쉴 수 있습니다. 고장이 아니니 사용하셔도 무관합니다.
 - 강한 충격이나 과도한 힘을 주지 마십시오.
 - 급수통에 이물질이나 뜨거운 물을 넣지 말아 주십시오. 고장과 사용자에게 상해를 입힐 수 있습니다.
- 충전 시**
 - 충전기를 물기가 있는곳에 두지 마십시오.
 - 충전단자 주위를 완전히 건조시킨 후 충전하십시오.
 - 지정된 충전기간 사용하십시오.
 - 전자 단자에 금속 물체가 닿지 않도록 하십시오.
 - 외부 온도 40도 이상의 온도에서 배터리 충전을 하지 마십시오.
 - 배터리를 충전한 상태로 오랫동안 보관할 경우 성능 감소의 우려가 있으므로 완전히 충전된 이후 충전기를 제거해 주십시오.
 - 제품설명서에 명시된 방법으로만 배터리를 충전하십시오.
 - 배터리 잔량이나 온도, 환경에 따라 충전시간이 다를 수 있습니다.
- 세척 및 유지보수**
 - 노즐 교체 시 동봉 또는 별도 판매되는 전용 노즐을 사용하십시오. 타사의 노즐과 호환되지 않습니다.
 - 제품 사용 후에는 노즐을 세척한 뒤 자연 건조하여 주십시오. 완벽히 건조되지 않으면 세균이 번식할 수 있습니다.
 - 사용한지 3달이 경과 되거나 노즐이 변형된 경우에는 노즐을 교체하여 주십시오.
 - 자석의 파손이 육안으로 확인될 경우, 노즐을 교체하여 주십시오.
 - 소독을 위해 끓는 물 혹은 화학약품에 담그지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 세척 시 식기세척기, 세탁기와 같은 기기에 세척하지 말아 주십시오.

주의사항

FAQ

증상	원인	해결 방법
제품이 작동하지 않음	배터리 방전	충전 후 사용하십시오.
노즐과 본체 사이 누수	장착 오류	노즐과 장착부에 이물질이 있는지 확인한 후 다시 삽입하십시오.
급수통 누수	장착 오류	급수통과 급수통 연결부에 이물질이 묻어있는지 확인한 후 다시 삽입하십시오.
	거꾸로 사용	거꾸로 사용 시 공기 구멍을 통해 물이 쉴 수 있습니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하셔도 됩니다.
출력 저하	배터리 부족	충전 후 사용하십시오.
	노즐 변형	노즐 또는 노즐 장착부에 이물질이 쌓이거나, 형태가 변형되었을 경우 노즐을 교체해 주십시오.
	모드 설정이 잘못되어 있을 경우	모드 설정이 Soft로 되어있을 수 있습니다. 모드를 변경하여 사용해 주십시오.
작동 중 물 분사 안됨	메쉬 필터 막힘	메쉬 필터를 세척해 주십시오.
	수통의 물 모두 사용	수통에 물을 채워 주십시오.
충전이 되지 않음	충전 커넥터 불량	충전 커넥터 단자에 물, 먼지와 같은 이물질이 있다면 깨끗하게 청소하여 사용해 주십시오.
	제품 고장	충전 포트를 청소한 후에도 충전이 안되면 A/S를 요청하십시오.

배터리 안내

- 본 제품은 Type-C 충전을 지원합니다.
 - 충전 중 배터리 잔량 80% 이하일 경우 적색, 그 이상이면 청색이 켜집니다. 사용 중 배터리 잔량 20% 이하일 경우 적색, 그 이상이면 청색이 켜집니다.
 - 본 제품의 충전 규격은 5V 1A 입니다. 알맞은 규격의 어댑터를 사용하십시오. (5V 1A 이하의 어댑터에서는 충전이 안될 수 있습니다)
 - USB 전원을 연결할 때 물기가 없도록 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- | 배터리 잔량 | 배터리 표시등 |
|-------------|---------|
| 충전 중 80% 초과 | 청색 |
| 충전 중 80% 이하 | 적색 점멸 |
| 사용 중 20% 초과 | 청색 |
| 사용 중 20% 이하 | 적색 |

제품사양

제품정보

- 상품명 : SONIQ WATER FLOSSER
- 모델명 : SWF-001~010
- 재질 : ABS, PC, Silicone 외
- 정격입력 : DC 5V
- 소비전력 : 5W
- 충전시간 : 5시간
- 맥동수압 : 1,800 / 분
- 배터리 사양 : 3.7V, 2,550mAh
- 방수 등급 : IPX7
- 크기 : 91 x 73 x 227 (mm)
- 무게 : 395g

A/S 및 유지보수


무상 A/S 기간은 6개월이며, 무상 A/S 기간 이더라도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시에는 유상으로 전환됩니다. A/S 및 유지보수 문의는 제조원 정보를 참고하여 주십시오.

제조자

- 제조국 : 대한민국
- 제조원
(주)제노스
경기도 수원시 영통구
창룡대로256번길 56, D-Factory
Tel. 031-888-5100
www.genoss.com

폐기

- 배터리를 함부로 폐기하지 마십시오.
- 폐기는 각 국가, 지역의 규정에 따른 폐기방법에 따라 폐기하십시오.

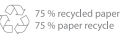


SONIQ
WATER FLOSSER


모델명: SWF

Dentium **GENOSS**

구성품

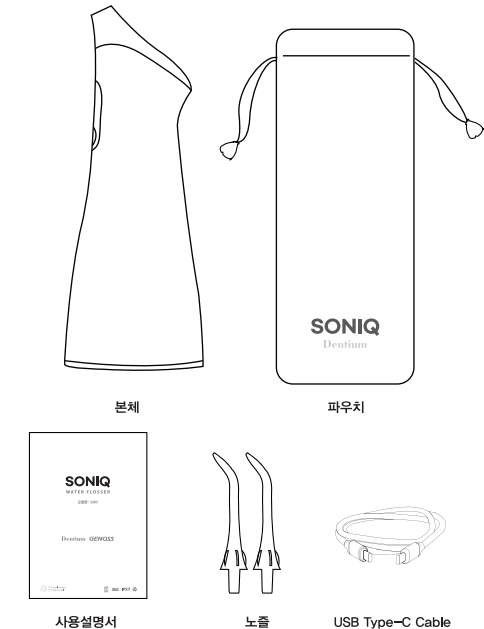


제품구조

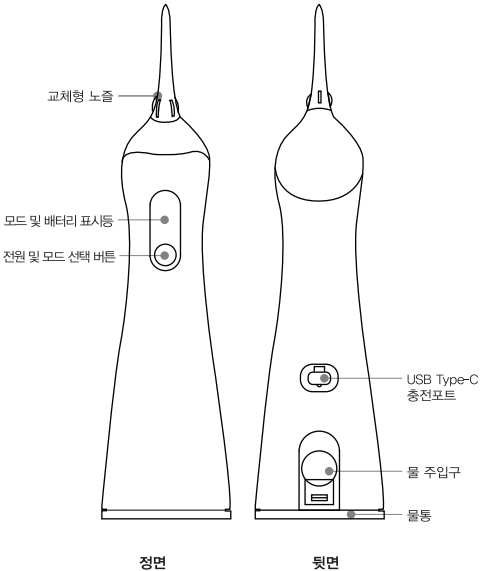

제품기능



사용모드 설명

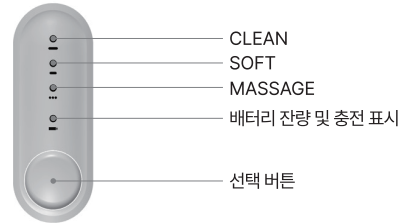

- CLEAN-SOFT-MASSAGE 3가지 모드의 강도를 사용자에게 맞도록 설정하십시오.
- 강도 변경은 구동 전과 구동 중 어느 때나 가능합니다.
- 마지막 사용한 강도를 기억하여 다음 사용 시 해당 강도로 시작하는 메모리 기능이 있습니다.
- 배터리 잔량이 빨간색일때 충전하는 것을 권장합니다.

사용 모드

모드	모드 설명
CLEAN	강한 수압 모드
SOFT	약한 수압 모드
MASSAGE	강약을 자동 조절하여 잇몸을 부드럽게 마사지하는 모드


사용법

충전 방법


- 본체 뒷면의 충전 포트 덮개를 제거하십시오.
 - 동봉된 Type-C 케이블로 충전하십시오.
- ※ 충전 중에는 안전을 위해 작동 되지 않습니다.
- ※ 충전 완료 후 물이 들어가지 않도록 포트 덮개를 덮어주십시오.



- 충전 표시등에 적색에서 파란 불이 들어올 때까지 충전하십시오.

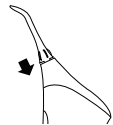

- 본체 상부의 장착부에 노즐을 장착하십시오. 노즐과 본체가 거의 닿도록 끝까지 밀어 넣어 주십시오.

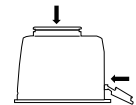

- 급수통에 물을 충분히 채워주십시오. 물 주입구를 통해 물을 넣는 방법과 급수통을 분리하여 넣는 방법 중 편한 방법을 사용하십시오.

보관 및 세척



본체

- 내부 부품 보관을 위해 급수통에 따뜻한 물을 채운 후 전원을 켜서 작동시켜 비워질 때까지 분사하십시오.
- 표면의 물기는 부드러운 천으로 제거하시고, 세척할 경우 중성비누를 사용하십시오.



급수통

- 깨끗한 물로 급수통 내부를 세척하십시오.
- 세척 후에는 꼭 건조 시켜주십시오.



노즐

- 사용 후 수돗물로 간단히 세척 후 반드시 건조 시켜주십시오.
- 본체 및 노즐은 물기 및 오염 물질을 닦은 후 보관하여 주십시오.
- 노즐은 3개월마다 교체하는 것을 권장합니다.

주의사항

모든 구성품은 사용 후 물기가 있는 상태로 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.